

ОПИС ПРИЛАДУ:


Лопатка
скрабера

Іонний
провідник

Режим
роботи

Вкл / викл
(довге
натискання)

Перемикання
режимів (легке
натиснення)

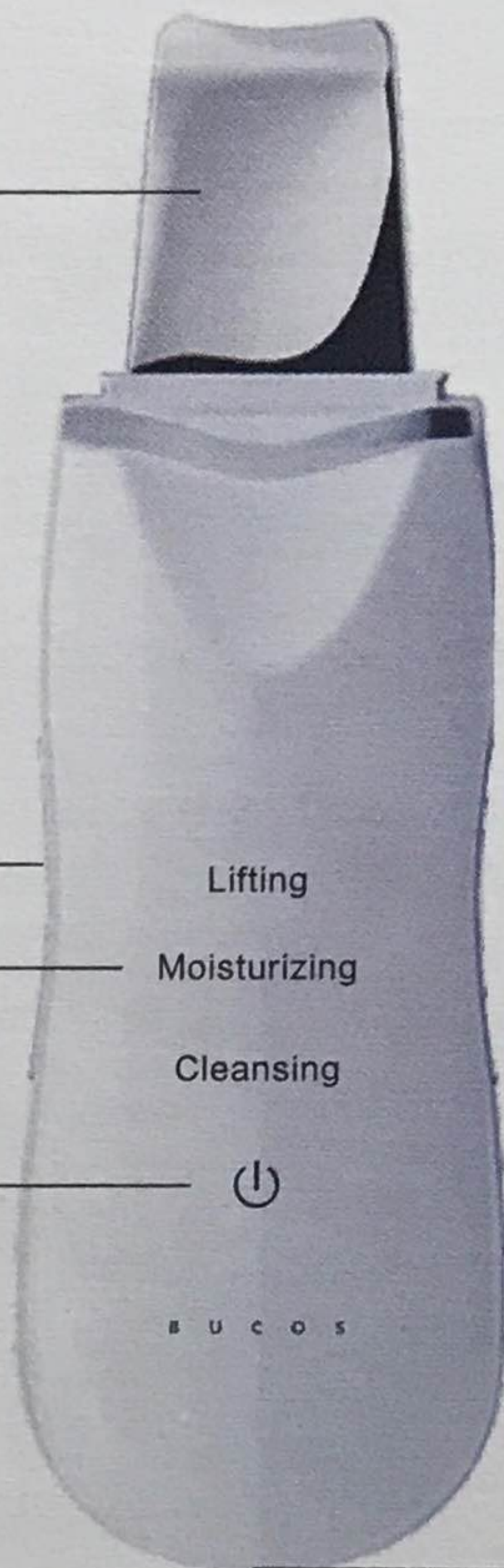

USB-порт
для зарядки

ПРИНЦИП ДІЇ :

Ультразвук - це високочастотна хвиля механічної вібрації, яка широко використовується в медицині та косметології.

Завдяки поєднанню активного впливу засобу для чищення та ультразвукових коливань відлущується верхній ороговілий шар шкіри, освітлюються пігментні плями, вирівнюється колір обличчя. Очищена шкіра має кращий доступ кисню, більш глибоко сприймає живильні, зволожуючі та омолоджуючі засоби. Таким чином, ультразвуковий пілінг чудово готує шкіру до подальшого нанесення косметичних препаратів для ліфтингу та омолодження шкіри.

Одночасно з пілінгом здійснюється легкий мікротоковий масаж. Він прискорює місцевий кровообіг, що також сприятливо впливає на стан тканин.

Масаж ультразвуком не порівняти зі звичайними масажними методиками на обличчі, адже він дає вражаючі результати: підвищення пружності та еластичності шкіри, безопераційний ліфтинг, зменшення глибини і кількості зморшок. Посилення лімфотоку і кровотоку при масажі сприяє зменшенню набряків, вирівнює колір обличчя, підвищує тургор та щільність шкіри.

Поєднання процедур ультразвукового пілінгу і масажу безумовно є відмінним варіантом комплексного догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте.

Апарат для УЗ чищення впливає м'яко і не викликає дискомфорту. Процедура не вимагає спеціальної підготовки і не має відновного періоду.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Ергономічний дизайн, мультифункціональність, висока ефективність і безпека УЗ скрабера забезпечують результат, ідентичний салонним процедурам.

Регулярне застосування дозволяє якісно очистити шкіру, уповільнити передчасне старіння, знизити схильність пор до подальшої закупорки, а також досягати таких цілей:

- Ефективне очищення шкіри обличчя від ороговілих клітин шкіри
- Позбавлення від чорних крапок, запалень, інфільтратів
- Зменшення розширених пор
- Поліпшення кольору обличчя і тону шкіри
- Нормалізація процесів жирності шкіри
- Відновлення пружності та еластичності
- Зменшення набрякості, ознак втоми і стресу
- Зменшення кількості зморшок
- Підвищення зволоженості шкіри
- Зменшення вираженості рубців та шрамів, яскравості пігментних плям
- Багаторазове посилення ефекту від застосування косметичних засобів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назва: Sonic Skin Scrubber S1

Джерело живлення: AC 100V-240V 50 Гц / 60 Гц

Вихідна напруга: 5 В / 600 мА

Режим зарядки: акумулятор (літієва батарея)

Вага (без упаковки): близько 99 г

Потужність: 2 Вт

Розмір: 173 * 55 * 15,5 мм

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Неможливо підключити джерело живлення - Недостатній заряд / Недолік заряду акумулятора - Див. Інструкцію «Спосіб зарядки».

Відключення при використанні - Функція автоматичного відключення (Даний пристрій автоматично перейде в режим очікування через десять хвилин використання і вимкнеться через одну хвилину, якщо він не використовується для збереження заряду).

Недостатньо заряду акумулятора (апарат подає звуковий сигнал - зверніться до інструкції «спосіб зарядки»)

Неможливо зарядити - блок USB не підключений до заряджаемого пристрою - підключіть шнур зарядки USB - замініть зарядний пристрій

Несправність зарядного пристрою - перезапустіть зарядний пристрій.

Несправність адаптера (продається окремо) - використовуйте інший зарядний пристрій.

СПОСІБ ЗАРЯДКИ:

1. Підключення зарядного пристрою




При відправці приладу з заводу акумулятор заряджений не повністю. Будь ласка, зарядіть його повністю перед використанням.

2. Для підзарядки пристрій використовується USB-вхід комп'ютера, шнур заряду для мобільного телефону та адаптер.

В процесі зарядки світлодіодні індикатори безперервно блимають, вони перестануть блимати при повному заряді.

Перед зарядкою перевірте стан батареї.

Перед першим використанням зніміть захисну плівку з приладу.

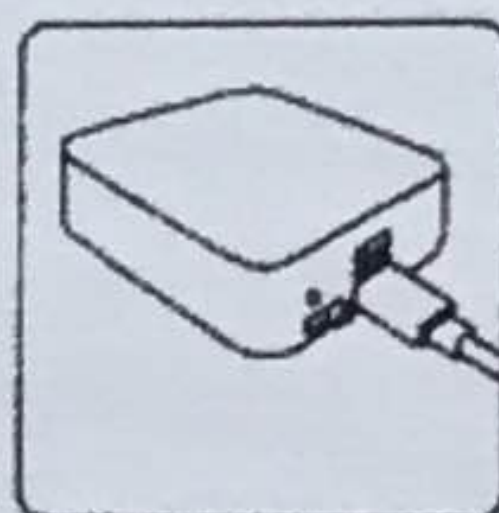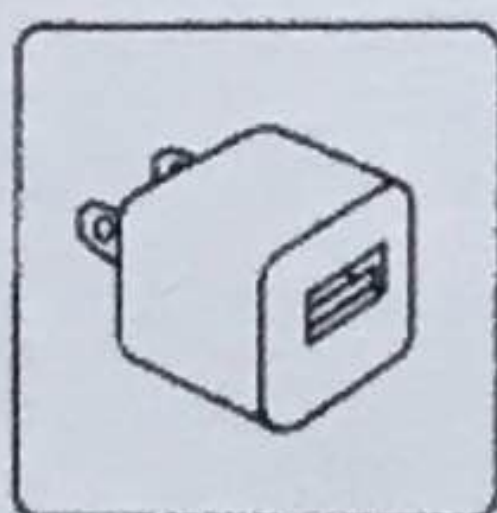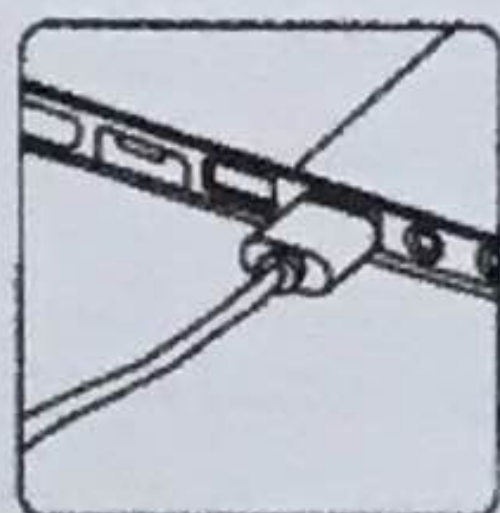

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Якщо після тривалого натискання кнопки живлення пристрій не може завантажитися, будь ласка, зарядіть його.

Якщо пристрій видає звукові сигнали, будь ласка, зарядіть його. В іншому випадку він автоматично вимкнеться.

Апарат автоматично перейде в режим очікування через десять хвилин використання і вимкнеться через одну хвилину, якщо він не використовується для збереження заряду.

Для повної зарядки потрібно близько 150 хвилин (при першому використанні зарядіть прилад протягом 5 годин).

Після повної зарядки пристрій можна використовувати приблизно протягом 80 хвилин.

Будь ласка, заряджайте пристрій вчасно.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Очищення

1.Очистіть обличчя від макіяжу і інших забруднень звичним для вас засобом.

2.Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб ввімкнути прилад.


3.Використовувати необхідно на зволожену шкіру, щоб переміщення лопатки по обличчю було легшим і приємнішим, а також щоб поліпшити сам процес очищення пор.

4.Очистіть обличчя скрабером як показано на малюнку 2.

Робочу частину приладу тримати під кутом 45 градусів. Сильно не натискати.

5.Після закінчення процедури змити залишки, протерти обличчя тоніком. Нанести заспокійливу маску. Після неї - зволожити кремом.

Не забувайте дезинфікувати прилад перед і після процедури.

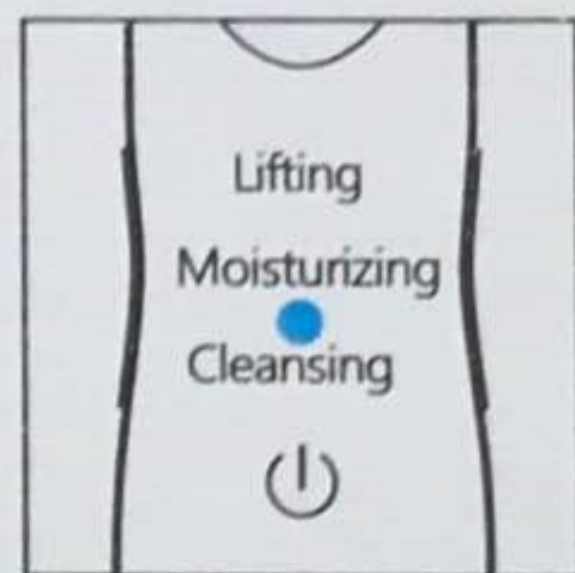


Зволоження

1.Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, для ввімкнення приладу.

2.Легким натисканням кнопки вмикання встановіть режим зволоження (Moisturizing).


3.На очищену шкіру нанесіть маску або будь-який інший засіб. Переміщуйте лопатку скрабера по масажним лініям, не затримуючи довго на місці.

Ця процедура гарантує більш глибоке зволоження шкіри та її тонізацію.

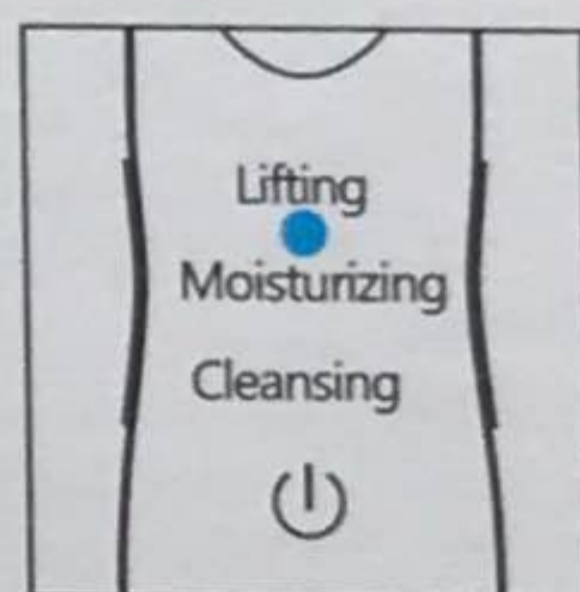

Ліфтинг

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, для ввімкнення приладу.
2. Легким натисканням кнопки вмикання встановіть режим ліфтингу (lifting).
3. Режим Lifting використовуйте самостійно по зволоженой водою шкірі або з ліфтинг-засобами, дія яких посилиться завдяки ультразвуку.
4. Як показано на малюнку 2, робіть пригладжуючі рухи вздовж масажних ліній, від центру до периферії.

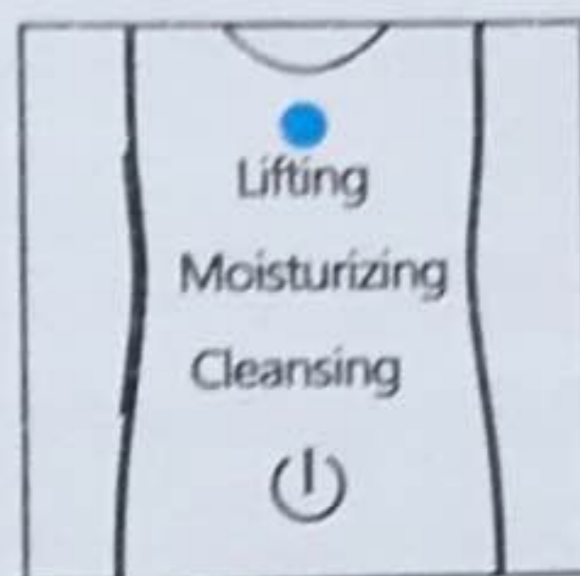

ОЧИЩЕННЯ/ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ:

1. Переконайтеся, що пристрій вимкнено.
 2. Очистіть пристрій ватяними дисками або м'якою тканиною.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати розчинники та інші агресивні промислові рідини для очищення звукової лопатки, для уникнення пошкоджень.
 3. Зберігайте пристрій в сухому та прохолодному місці.
НЕ зберігайте пристрій у вологому місці, наприклад у ванній.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.